

# MIDMARK® Manuel d'installation et d'utilisation

## POTENCE DE PERFUSION RÉGLABLE 9A77001

### PIÈCES DU COLIS

Réf.	Description	Qté
9A77001	Potence de perfusion réglable.....	1
003-0934-02	Manuel d'installation et d'utilisation.....	1

### OUTILS REQUIS

Aucun

### INTRODUCTION


Permet de soutenir le fluide d'une perfusion intraveineuse en toute sécurité. À monter sur la glissière de base d'une table ou le rail latéral d'un brancard.



#### AVERTISSEMENT


Ne monter qu'un seul accessoire à la fois (réf. 9A77001) sur la glissière de la base d'une table ou le rail latéral d'un brancard. Vérifier qu'il n'y a rien sur la table qui puisse entraver le fonctionnement de la potence de perfusion. La potence de perfusion risque d'être trop haute pour un plafond de 2,44 m (8 ft.). Toujours soutenir la potence pendant qu'on modifie sa hauteur.

### INSTALLATION

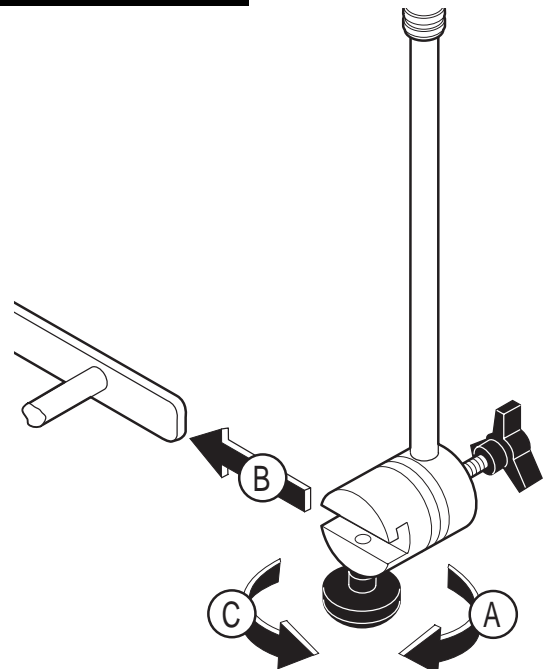


- A. Desserrer le bouton à la base du pivot.
- B. Glisser le pivot sur la glissière de base de la table d'examen ou le rail latéral du brancard.
- C. Le placer à l'endroit désiré et resserrer le bouton.

## FONCTIONNEMENT (ROTATION)

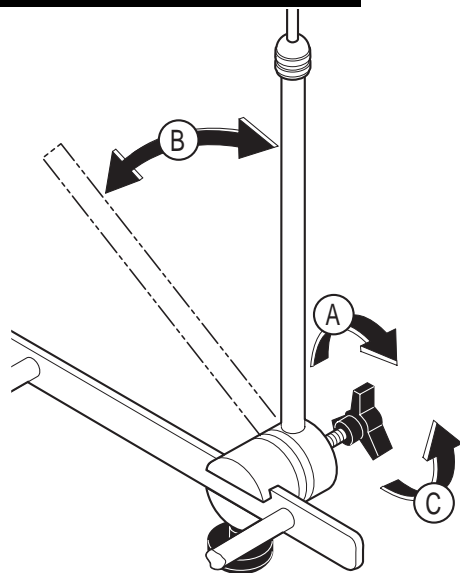

- A. Desserrer le bouton.
- B. Faire pivoter la potence de perfusion dans la position désirée.
- C. Resserrer le bouton.

## FONCTIONNEMENT (RÉGLAGE DE LA HAUTEUR)

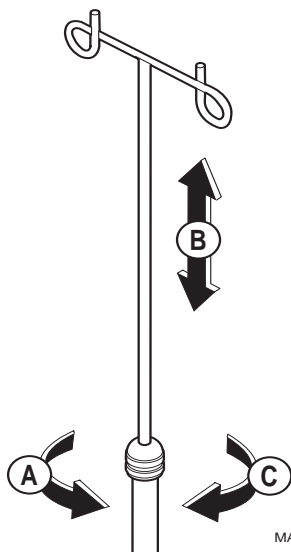

- A. Soutenir le haut de la potence et desserrer la virole.
- B. Relever ou abaisser le haut de la potence dans la position désirée.
- C. Resserrer la virole.

# MIDMARK®

Midmark Corporation, Versailles, Ohio 45380 U.S.A.  
(937) 526-3662 FAX (937) 526-5542

003-0934-02 Rév. A (8/98)